

>> SUAP-FTO-24

Mesures d'hygiène concernant les véhicules sanitaires



Nombre d'équipiers



Matériel

- Des gants de ménage ou gants à usage unique selon le type de désinfection.
- Le produit détergent/désinfectant prêt à l'emploi : centrale de dilution ou SPRAY (ex : Surfanios®, Aniospray®...) selon le type de désinfection.
- Des lavettes à usage unique .
- Les 2 seaux (bleu et rouge).
- Un aspirateur réservé au VSAV.
- Le balai réservoir pulse + bandeau(x) de sol à usage unique.
- Le carnet de désinfection du VSAV.
- Un spray désodorisant



Indications

Principes de base

- **Le matériel nécessaire au nettoyage et à la désinfection des VSAV et du local VSAV doit être réservé UNIQUEMENT à cet effet.**
- Il ne doit, en aucun cas, servir à l'entretien des autres véhicules et du reste du casernement.
- **Balai classique (ou balayette) proscrit : nid à microbes et dispersion des saletés et germes dans la cellule sanitaire.**
- Lavage soigneux des mains : avant et après la réalisation des protocoles de nettoyage /désinfection.
- Utilisation de gants de ménage.
- Le matériel de nettoyage doit être entretenu régulièrement .

Règles de base

- Toujours du propre vers le sale.
- Toujours du haut vers le bas.







Technique des 2 seaux





- Remplir le seau bleu réservé au lavage avec la solution détergente/désinfectante prête à l'emploi (centrale de dilution).
- Remplir le seau rouge réservé au rinçage d'eau tiède.
- Mettre des gants de ménage.
- Imbiber une lavette de la solution détergente / désinfectant (seau bleu).
- Procéder au nettoyage des surfaces et matériel en respectant les principes de base.
- Rincer régulièrement la lavette dans le seau de rinçage (rouge).
- Si nécessaire changer de lavette.
- Renouveler le produit et l'eau des seaux aussi souvent que nécessaire.
- Ne pas rincer, laisser sécher.
- A la fin de la désinfection, laver à l'eau et au savon les seaux et les gants de ménage.
- Rincer et laisser sécher sur un endroit propre.



Nettoyage et désinfection du sol

- Aspirer le sol de la cellule sanitaire et de la cabine avant avec l'aspirateur réservé à cet usage (⚠ corps de l'aspirateur à l'extérieur de la VSAV !)

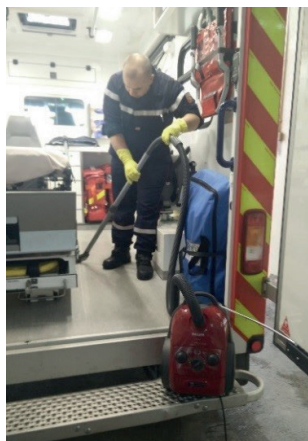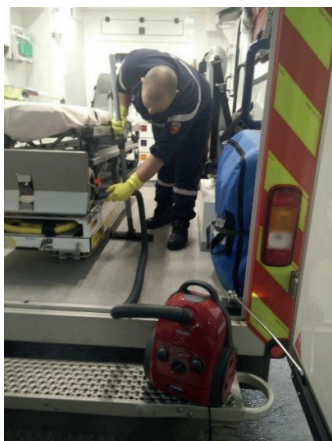

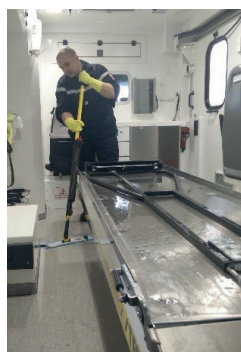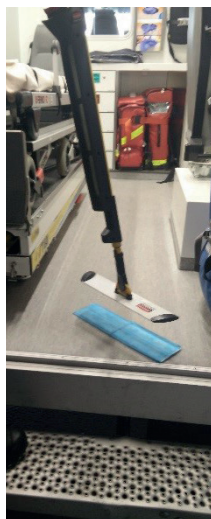

- Mettre des gants de ménage
- Remplir la réserve du balai réservoir pulse® avec la solution détergente/ désinfectante directement à la centrale de dilution
- Fixer le bandeau de sol sur le support plat du balai (système velcro)
- Pulvériser le produit au sol en appuyant sur le bouton pression sur le manche du balai : jets dirigés vers vous.
- Laver le sol du fond vers les portes arrière par des mouvements en S (méthode de la godille).
- Décaler le brancard latéralement pour accéder à toute la surface du sol.
- Faire un double passage pour une désinfection complète après avoir changé de bandeau de sol.

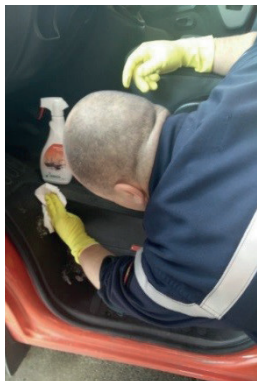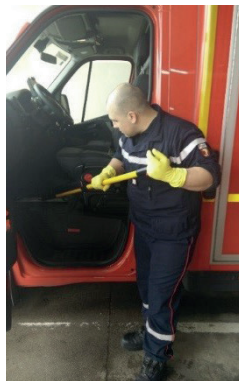

- Nettoyer le sol de la cabine avec le balai réservoir, compléter à la main avec une lavette imbibée de solution désinfectante pour les parties difficilement accessibles au balai.
- Tenir les portes et fenêtres du VSAV fermées après la désinfection.

- 1 bandeau : nettoyage classique entre 2 interventions = désinfection simple
- 2 bandeaux : désinfection complète, souillures importantes, intervention à risque infectieux.



Entratien / Maintenance

- Le matériel réservé à l'hygiène des VSAV doit être entretenu régulièrement : nettoyage avec une lavette imbibée de solution détergente/ désinfectante
 - balai réservoir pulse (manche et support bandeau de sol).
 - seaux.
 - corps de l'aspirateur (changer régulièrement le filtre).
- La durée d'action de la solution détergente / désinfectante prête à l'emploi tirée de la centrale de dilution est de 24h :
 - renouveler le produit du balai toute les matins pour les CSP à forte activité.
 - vider le réservoir du balai après chaque utilisation pour les CIS à faible activité.
- Stockage du matériel d'hygiène dans le local VSAV.

