	Bande imbibée de substance hémostatique	Création : Décembre 2022
	Fiche matériel	Mise à jour Version 1

INDICATIONS

- Hémorragies externes pour lesquelles la compression manuelle continue est inefficace ou impossible
- Hémorragies siégeant dans une zone non garrotable (racine d'un membre (creux axillaire, pli de l'aîne), au niveau des fesses, du tronc, du cou et de la tête)
- Moignon d'une section de membre

CONTRE - INDICATIONS





- Plaie thoracique soufflante
- Fracture ouverte du crâne
- Présence de corps étranger



PRESENTATION

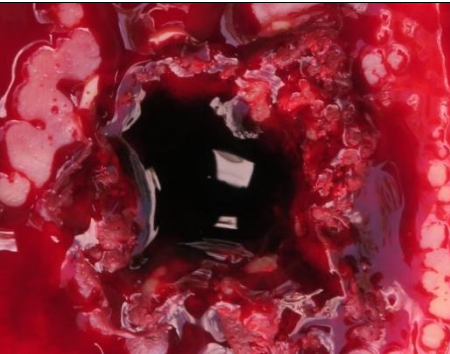

Largeur : 7,5 cm
Longueur : 3,7 m

REALISATION

	<p>Localiser l'origine du saignement.</p>
	<p>Ouvrir le sachet en déchirant au niveau des encoches d'ouvertures</p>
	<p>A l'aide du ou des doigts, insérer la bande de substance imbibée dans la plaie en la dépliant. Tout au long de la mise en place, maintenir une pression sur la bande.</p>
	<p>Comblar la totalité de la cavité.</p>

	<p>Si une seule bande de substance imbibée ne suffit pas, poursuivre avec une 2^{de} bande ou une bande extensible.</p> <p>Si la bande de substance imbibée est trop longue, poser le surplus sur la plaie et d'exercer une pression par-dessus.</p>
	<p>Maintenir une compression manuelle sur le pansement hémostatique pendant 3 minutes.</p>
	<p>Réaliser un pansement compressif à l'aide d'un pansement compressif d'urgence, afin de maintenir la compression.</p>
	<p>Insérer l'emballage vide dans le pansement compressif d'urgence de sorte à le laisser visible au niveau du bandage.</p>

RISQUES ET CONTRAINTES

- Une fois mis en place, ne jamais retirer le pansement imbibé de substance hémostatique de la plaie.
- Vérifier la date de péremption.
- En l'absence de bande imbibée de substance hémostatique, réaliser la même procédure en utilisant une bande extensible.

CRITERES D'EFFICACITE

- Le saignement est arrêté et ne reprend pas.

REASSORT

- Le réassort s'effectue sur fiche de matériovigilance, adressée à la PUI, en spécifiant le numéro d'intervention.