

	<h1>KIT ACCOUCHEMENT</h1>	Création : Décembre 2021
	Fiche matériel	Mise à jour Version 2 3/11/2022

## INDICATIONS

Accouchement imminent, en cours ou réalisé.

## PRESENTATION

Le kit accouchement se compose de :

- 1 set accouchement
- 2 clamps de Bar
- 1 bonnet
- 1 sonde d'aspiration pédiatrique
- 1 stop vide pédiatrique
- 1 insufflateur à usage unique « nouveau-né et nourrisson » (< 10 kg)
- 1 filtre antibactérien pédiatrique
- 2 couvertures de survie
- 2 fiches papier :
  - Bilan de la parturiente (femme enceinte)
  - Fiche de liaison avec la salle d'accouchement

Le tout rangé dans un sac zip



Lors d'un accouchement, ce kit sera complété par :

- 1 bouteille d'O<sub>2</sub> supplémentaire (en plus de celle du sac de prompt secours, 1 pour la mère et 1 pour l'enfant)
- L'aspirateur à mucosité
- Sacs DASRI



## REALISATION

L'utilisation des éléments du kit accouchement sera à adapter selon que l'accouchement soit imminent, en cours ou déjà réalisé (utilisation uniquement des clamps de Bar et du bonnet par exemple)

### Installation de la victime

Sur un lit ou dans un lieu adapté

Si l'accouchement risque d'avoir lieu dans le VSAV :

- Installer le brancard tête coté porte arrière pour avoir de l'espace pour travailler.
- Augmenter le chauffage pour avoir une température entre 25 et 30°C


Demander à la parturiente de quitter ses vêtements



## Se nettoyer les mains, mettre des gants d'examen et ouvrir le set accouchement




1

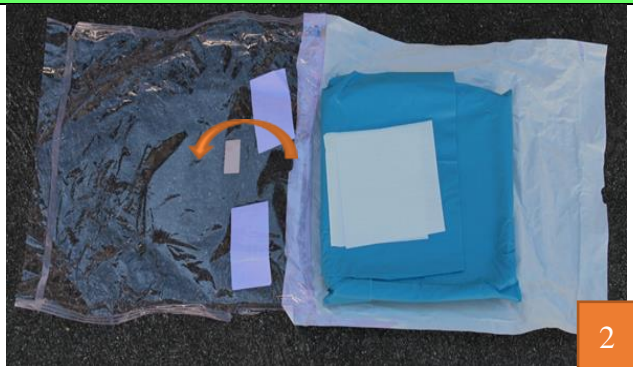

2

### Ouvrir le set accouchement

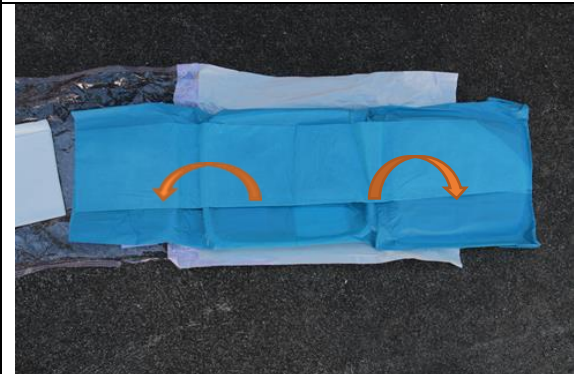


3



4

### Déplier le champs stérile

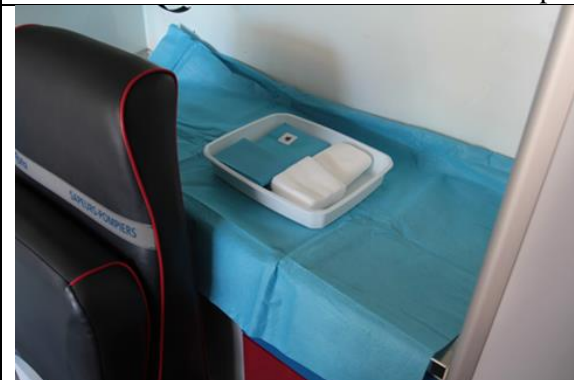

5

Penser à sortir:


- les clamps de Bar
- le BAVU
- le bonnet

Champ sous fessier avec poche de recueil des liquides

Champ stérile

Ciseau\* ouvert

Plateau (pouvant servir au recueil du placenta)

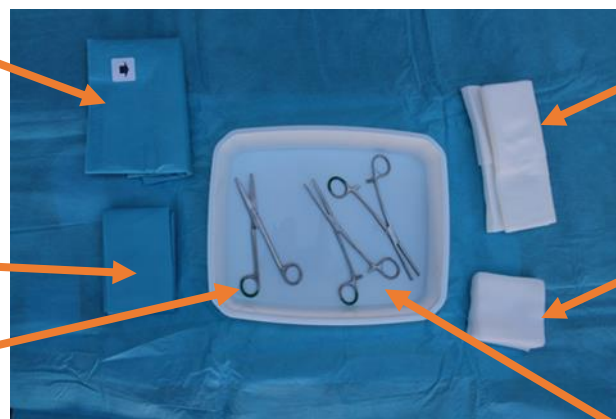

Champ de recueil nouveau-né

Compresse

6

Pinces Kocher\* ouvertes

\*Pourront être utilisé pour sectionner le cordon ombilical ou en cas de circulaire du cordon (sur guidance et indication médicale)



## Installer le champ sous fessier



## Déplier le champ sous fessier



## Insérer vos mains dans les ouvertures du champ



## Glisser le champ sous les fesses de la parturiente



Positionner le champ et la parturiente suffisamment au bord du brancard ou du lit... pour que la poche de recueil se trouve dans le « vide ».



Couvrir la parturiente et ouvrir la poche de recueil.



Une fois l'accouchement réalisé, noter le niveau de liquide (amniotique).

Par la suite vous pouvez suivre les pertes sanguines sur la poche de recueil graduée  
(niveau d'alerte = 500ml).

## Prise en charge du nouveau-né

Clamper le cordon ombilical :

- 1<sup>er</sup> clamp de Bar à 10 cm de l'ombilic du bébé
- 2<sup>ème</sup> clamp de Bar à 15 cm de l'ombilic du bébé.

*En l'absence de geste de réanimation le cordon ne sera pas coupé sans avis médical*



1



2

Sécher **rapidement** le nouveau-né dans le champ de recueil, en frictionnant le dos.

Sortir le bonnet de son emballage




3



4

Mettre un bonnet au bébé

Enlever le champ de recueil  
Déposer le nouveau-né en peau à peau (visage sur le côté) et envelopper la maman et l'enfant avec la couverture de survie

	<div data-bbox="616 439 675 495" data-label="Text"> <p>5</p> </div>	<p>Si des gestes de secourisme sont nécessaires, sur la mère ou le nouveau-né, sectionner le cordon ombilical et envelopper dès que possible le nouveau-né dans une couverture de survie.</p>
--	---	---

## ENTRETIEN/MAINTENANCE

- Déchets souillés (compresse, plateau, BAVU, sonde d'aspiration...) seront jetés dans un sac DASRI
- Contrôler les dates de péremption et l'intégrité des emballages.
  - o Ne pas tenir compte de la date de péremption du bonnet

## REASSORT

Le matériel non utilisé sera conservé pour un usage ultérieur.

Les éléments utilisés seront commandés à la PUI sur la fiche de matério-vigilance, en précisant :

- Le numéro d'intervention
- La liste précise des éléments utilisés.